



Hair-GENTRON

— Hybrid —

LED helma s masážní a vyhřívací funkcí na ošetření proti vypadávání vlasů.




[LED]

LED světlo je absorbováno mitochondriemi vlasových folikulů a stimuluje produkci energie ve vlasových buňkách, což následně prodlužuje růstovou fázi vlasů.



- Stimuluje opětovný vstup anagenu do telogenních vlasových folikulů
- Zvyšuje míru proliferace v aktivních anagenních vlasových folikulech
- Prodloužuje dobu trvání anagenní fáze
- Zabraňuje předčasnému rozvoji katagenu

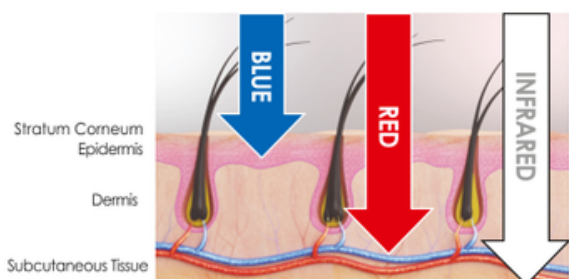

MODRÉ SVĚTLO

- Působí v mikrobiologické kontrole
- Snižuje mazovou žlázu, snižuje mastnotu pokožky hlavy
- Aktivuje keratin přítomný ve vlasovém stvolu

ČERVENÉ SVĚTLO

- Podporuje buněčný metabolismus, zlepšuje krevní oběh
- Podporuje přívod výživy do kapilár a posiluje vlasové prameny

INFRAČERVENÉ SVĚTLO

- Působí v mikrobiologické kontrole
- Snižuje mazovou žlázu, snižuje mastnotu pokožky hlavy
- Aktivuje keratin přítomný ve vlasovém stvolu

[Funkce masáže a vyhřívání]



**Funkce masáže & ohřevu
zlepšuje průtok krve v pokožce hlavy**



Poskytuje více živin a kyslíku vlasovým folikulům

[Výhody HAIR GENTRON]



Neinvazivní
světelná terapie



Bezpečná a
bezbolestná terapie



K dispozici pro
profesionální i domácí
péči



Infračervené světlo, červené
světlo a modré světlo
mohou být ozařovány
současně.



Je zaručena správná
vzdálenost od zdroje
světelné energie, což
vede k optimálnímu
emisnímu efektu.



Masážní funkci lze
provádět při
současném
ozařování světly.



Hudební režim
pomáhá uživateli cítit
se uvolněně.



Během ošetření lze přidat
funkci ohřevu.


[Komponenty]

A. Helma




1. Knoflík pro nastavení výšky
2. Knoflík pro nastavení šířky
3. LED světla

B. Stojan HAIR GENTRON (demontovaný)

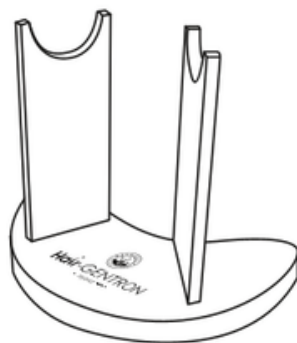

C. Kabel USB-C & adaptér

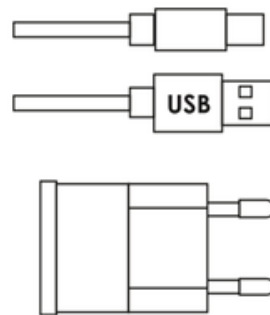


D. Ovladač [Indikátor]

1. Indikátor tlakové masáže vzduchu
2. Indikátor zahřívání
3. Hudební indikátor
4. LED indikátor

[Provozní tlačítka]

5. Zapnutí/vypnutí, ovládání času
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí vzduchové masáže
7. Tlačítko výběru světla LED
8. Tlačítko Hudba
9. Tlačítko Restart programu tlakové masáže (restart s ohřevem nebo bez něj)
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí ohřevu
11. Připojovací bod kabelu USB-C

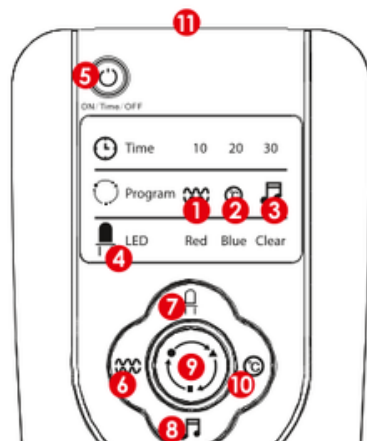

Distributor ČR: Dermitage s.r.o.

Ostrovní 2059/5, Praha 1 - Nové město, PSČ 110 00

Tel. +420 603 163 330 / E-mail: obchod@dermitage.cz / Web: www.dermitage.cz