

GENOSYS DERMAFIX-K needle cartridge



Zásobník jehliček Needle cartridge GENOSYS DERMAFIX-K je určen pro automatickou mikrojehličkovou terapii zařízením GENOSYS DERMAFIX-K.

Pro bezpečnost je sterilizovaná a speciální konstrukce zásobníku jehly zabraňuje kontaminaci zařízení tekutinou.

Na co dát pozor před ošetřením?

V závislosti na délce jehly se může objevit mírné píchání nebo bolest a nepohodlí.

V případě délky lékařského stupně před ošetřením topický je třeba aplikovat anestetikum.

Před aplikací je třeba zkontrolovat, zda je pacient alergický na určitý typ anestetika

Co očekávat po ošetření?

Den 0

Pokožka může mít růžová nebo zarudlá / výskyt modřin / pocit tepla a napjatosti

Den 1

Lze aplikovat make-up / Zdravě zářící a napnutější pleť

Den 2 ~
2 roky

Už žádné zarudnutí a nepohodlí / začíná kolagenéza a stav pleti se neustále zlepšuje

Opatření po použití




Před pobytem na slunci naneste opalovací krém.



Dbejte na dostatečnou hydrataci

KLINICKÉ VÝSLEDKY DERMAFIX-K

REJUVENACE POKOŽKY

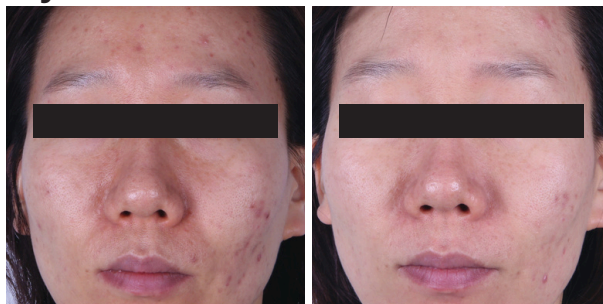

Před ošetřením

Po ošetření (2 měsíce)

REDUKCE VRÁSEK



Před ošetřením

Po ošetření (3 měsíce)

DEPIGMENTACE POKOŽKY



Před ošetřením

Po ošetření (2 měsíce)

Výhradní distributor ČR:

DERMITAGE s.r.o., Železná 14, 110 00 Praha 1
Tel. 603 163 330, obchod@dermitage.cz, eshop.dermitage.cz



DTS MG Co., Ltd.

#B108, 147, Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul, Korea

Tel. 82-2-558-5480 Fax. 82-2-558-5482 www.dtsmg.com | www.genosys.info



DermaFix-K
AUTO NEEDLING THERAPY




GENOSYS

GENOSYS DERMAFIX-K


Díky ochranné funkci kožní bariéry a velké molekulární velikosti kosmetických složek se většina složek plýtvá na povrchu kůže.

K vyřešení tohoto problému DERMAFIX-K vytváří mikrokanálky, které zajišťují cesty pro pronikání složek do pokožky. Navíc je aktivována přirozená hojivá síla kůže, aby vyléčila mikroranky vzniklé během tohoto procesu, což vede k přirozené indukci kolagenu.

[Transdermální podávání kosmeticky]

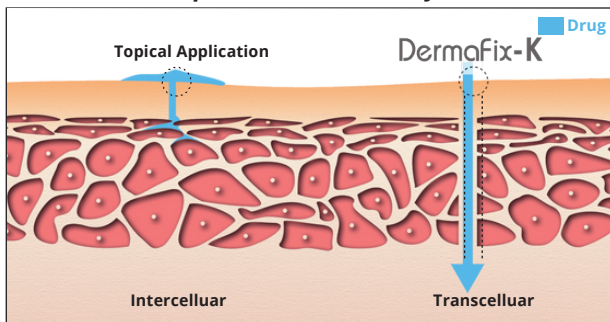

[Přirozený proces hojení ran a indukce kolagenu]

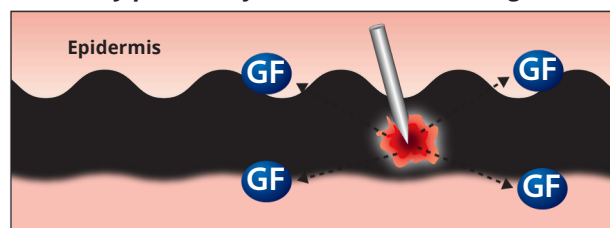

Účinky GENOSYS DERMAFIX-K


- ✓ Podporuje přirozenou sílu hojení ran
- ✓ Indukuje tvorbu kolagenu a elasticity
- ✓ Zpevňuje a vypíná pokožku
- ✓ Rozjasňuje a bělí pokožku
- ✓ Redukuje jemné linky a vrásky
- ✓ Zlepšuje jizvy po akné
- ✓ Zlepšuje jizvy po popáleninách
- ✓ Vyhlazuje strie
- ✓ Proti vypadávání vlasů (alopecie)
- ✓ Stahuje póry



Vlastnosti GENOSYS DERMAFIX-K

MINIMÁLNÍ BOLEST

Síla jehly – 0.20mm: Pocit bolestivosti je minimalizován.
Tvar jehly – hexagon: Rezný tvar jehly tvoří místo kruhového průřezu šesti-hrotý tvar (hexagon), takže při vpichu do kůže jehlami je menší kontaktní plocha. Díky tomu je kůže méně traumatizována a snižuje se bolestivost.

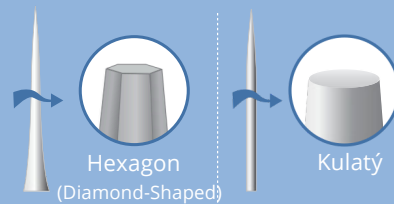

DERMAFIX-K

jiná zařízení

MULTI ÚČINKY

Vhodné k použití na různé kožní problémy: Podle účelu ošetření lze upravit délku jehly, což umožňuje efektivnější a cenově dostupnější terapii pro pacienta s mnoha kožními onemocněními vyžadujícími různé délky jehel.

BEZPEČNÉ

Typ - jehlový disk: Každý disk obsahuje 4 jehly. 4 disky tvoří jednu kartuši. Diskové jehly preventivně zabraňují zlomení jehel a nehrozí vážné poškození pokožky.

Pryžňová pružina jehlové kartuše: Zabraňuje proudění tekutin do zařízení během ošetření.



HYGIENICKÉ

Sterilizované jehly: Jehly jsou sterilizovány plynem EO a uzavřeny ve sterilizovaném blistru.

POHODLNÉ

Automatická pauza: Pokud vložíte zařízení do kolébky během používání, zařízení na chvíli přestane fungovat a po vyjmutí z kolébky začne automaticky fungovat. To umožňuje pohodlné používání přístroje bez nutnosti přístroj během ošetření zapínat/vypínat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Komponenty: Dermafix-K device, kartuše s jedličkami (2 ks), adaptér, stojan (kolébka)
Nastavitelná délka jehly: 0.25 ~2.0mm
Počet jehel: 16
Materiál jehly: SUS 304(H)
Adjustable speed: 5,500 ~ 7,500 RPM
Adaptér: Vstup100-240V, 50-60Hz, 0.6A / Výstup: 5V1A
Země původu: Korea

